


HEINE DELTA 30 UV

Dermatoskop

Ein Spektrum jenseits des Sichtbaren. Ultraviolette, polarisiertes und nicht-polarisiertes Licht vereint in einem einzigen fortschrittlichen Dermatoskop.

Mit erweitertem Lichtspektrum treten Sichtbares und detaillierte Strukturen deutlicher hervor – für diagnostische Klarheit auf galaktischem Niveau. Die intuitive Bedienung und nahtlose Integration verschiedener Beleuchtungsoptionen erleichtern die Untersuchung und unterstützen Sie zuverlässig bei klinischen Entscheidungen.

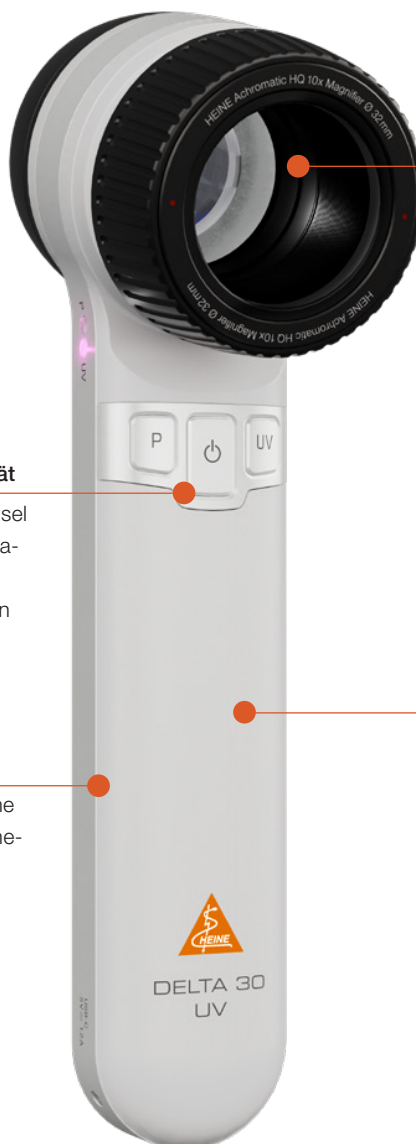

Achromatisches HEINE Optiksystem für ein optimales Sichtfeld

- 32 mm Linse bietet ein „echtes“ Sichtfeld von 30 mm
- 10-fache Vergrößerung für detaillierte Untersuchungen
- Integrierte Dioptrienanpassung für eine präzise Fokussierung

Drei Beleuchtungsoptionen in einem Gerät

- Toggle Funktion für einen einfachen Wechsel zwischen UV-, polarisiertem und nicht-polarisiertem Licht
- Naturgetreue Farbwiedergabe für erhöhten Kontrast und präzise Beurteilung

smooth SURFACE


- Hygienisches Design mit glatter Oberfläche
- Versenkte Anschlüsse für optimale Hygienestandards

Langlebig und robust für hohe Zuverlässigkeit

- Ultra-leichter Aluminiumrahmen für Stabilität und Langlebigkeit
- LED^{HQ} mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer und konstanter Leistung



HEINE DELTA 30 UV Dermatoskop

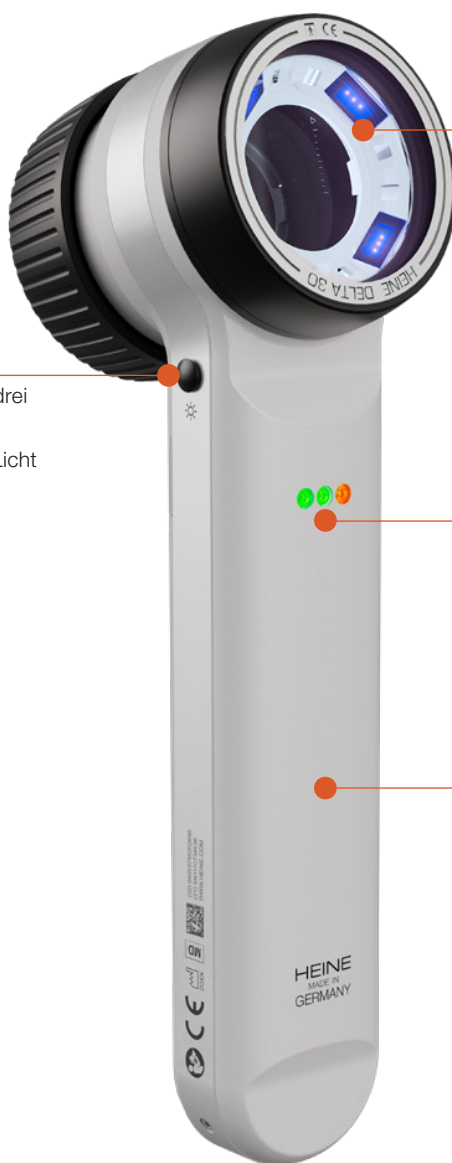

Individuell anpassbare Lichtintensität

- Seitlich angebrachte Taste mit drei Helligkeitsstufen
- Anpassbar für weißes und UV-Licht



Mehr entdecken

UV-Licht zur Darstellung von Fluoreszenz

- Zwölf UV-LEDs mit 365 nm sorgen für eine homogene Ausleuchtung
- Spezielle Filter gewährleisten ein reines, gleichmäßiges UV-Licht und eliminieren Störfarben

Smarte Stromversorgung

- Ladezustandsanzeige
- Automatische Ausschalt-Funktion
- Wiederaufladbar mit USB-C Kabel oder Ladestation

Intuitiv und ergonomisch

- Abgewinkeltes Griffdesign für die optimale Positionierung
- Einfache Bedienung für schnelle und zugleich präzise Untersuchungen
- Kompakt – ideal für den mobilen und flexiblen Einsatz



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
www.heine.com



Technische Änderungen vorbehalten.

05|26. A-000.00.278 DE

QUALITY
MADE IN GERMANY

